



4-kanałowy aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej FMS Care

Serwis



Szkolenie



Transport



Opis produktu

FMS Care to wielofunkcyjne urządzenie do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej.

GŁĘBOKA ELEKTROSTYMULACJA ELEKTROMAGNETYCZNA to nowoczesna bezdotykowa terapia łącząca zalety elektroterapii i magnetoterapii, jednak o znacznie większej mocy (do 3 Tesli). Dzięki temu działanie terapii sięga głębiej, co pozwala skuteczniej leczyć różnego rodzaju stany zapalne i schorzenia, które do tej pory były nieosiągalne dla fizykoterapii.

Zastosowanie urządzenia FMS Care:

- REHABILITACJA (schorzenia mięśniowo - szkieletowe)
- UROGINEKOLOGIA (nietrzymanie moczu, dysfunkcje seksualne)
- MEDYCYNĄ SPORTOWĄ (rehabilitacja pourazowa)
- FIZJOTERAPIA NEUROLOGICZNA (zaburzenia geriatryczne, przewlekły ból)

Aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej FMS Care może obsługiwać 4 kanały w zależności od potrzeb. Są to aplikatory manualne do FMS oraz fotel z aplikatorem wbudowanym w siedzenie lub w dolną część oparcia, albo oba aplikatory jednocześnie.

Aplikatory manualne do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej

Urządzenie FMS Care może być wyposażone w ręczne aplikatory FMS, stosowane najczęściej w medycynie sportowej i rehabilitacji. Dzięki niemu możemy szybko zlokalizować obszar, w którym uruchamiane są odpowiednie mięśnie i symulować je. Głęboka stymulacja elektromagnetyczna dostarcza impulsowe pole magnetyczne, które aktywuje nawet osłabione mięśnie i wzmacnia je. Ręczny aplikator FMS dostępny jest w **różnych wielkościach: okrągłe o średnicy $\varnothing$ 15cm oraz $\varnothing$ 11cm i podłużny**. By odciążyć ręce terapeuty, aplikator, po znalezieniu mu odpowiedniego miejsca do stymulacji mięśni, można umieścić **na specjalnym statywie**, lub przymocować go do ciała gumowymi pasami.








Aplikatory wbudowane w fotel do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej

FOTEL DO TERAPII OBSZARU LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA

Fotel z wbudowanym w dolną część oparcia aplikatorem do terapii FMS zapewnia bezbolesne, nieinwazyjne i skuteczne leczenie problemów z obszarem lędźwiowym pleców. Zabieg stymuluje mięśnie i przyspiesza krążenie bez bezpośredniego kontaktu ze skórą. Procedura leczenia jest prosta, a pacjent nie wymaga specjalnego przygotowania. Podczas terapii pacjent po prostu siada na krześle. Dokładny obszar stymulacji można ustawić, zmieniając pozycję aplikatora w oparciu fotela.

FOTEL DO TERAPII OKOLIC MIEDNICY

Urządzenie FMS Care opracowano również do leczenia osłabionych mięśni dna miednicy i nietrzymania moczu za pomocą głębokiej stymulacji elektromagnetycznej. Generowane przez urządzenie pulsujące pole magnetyczne powoduje skurcze mięśni dna miednicy. Ta terapia jest odpowiednia dla wszystkich rodzajów nietrzymania moczu i kału. FMS pomaga również pacjentom z dysfunkcjami seksualnymi oraz przewlekłym bólem obszaru miednicy i kręgosłupa lędźwiowego. Efektem stymulacji magnetycznej jest zwiększona wytrzymałość zwieracza i mięśni dna miednicy. Terapia ma również pozytywny wpływ na kondycję seksualną pacjenta, zdolność erekcji oraz osiągnięcia orgazmów.

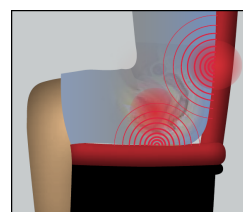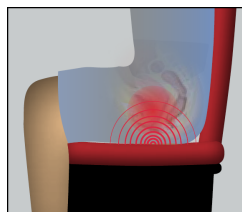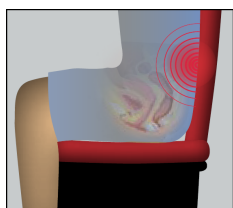

Aplikator pod stopy

Aplikator do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej schorzeń układu mięśniowo - szkieletowego stóp. Wyjątkowo wygodny i bardziej efektywny sposób terapii FMS dolnych partii nóg. Skuteczny przy uśmierzaniu bólu, wspomaganie gojenia złamań, obrzęków, stanów zapalnych i neuropatii, a także dla wzmocnienia mięśni.



Parametry techniczne aparatu do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej FMS Care:

Nazwa urządzenia	FMS Care
Przeznaczenie	Fizjoterapia Uroginiekologia
Częstotliwość terapii	1 do 160 Hz
Ilość kanałów	4
Moc pola magnetycznego	Max. 3 Tesli
Czas aktywny	1 s do 20 s
Czas przerwy	0 s do 240 s
Maksymalny czas trwania każdego cyklu	1 s do 20 min
Czas trwania zabiegu	1 - 60 min
Gotowe programy	tak
Gotowe protokoły	tak
Napięcie wejściowe	AC100-240V~50/60Hz
Moc	1500 VA
Wymiary sterownika (W x D x H)	41 x 59 x 27 cm
Klasyfikacja MDD 93/42/EEC	Klasa IIa

Skomponuj FMS Care według swoich potrzeb:

- aplikator manualny L ø 15cm
- aplikator manualny M ø 11cm
- aplikator manualny podłużny
- aplikator pod stopy
- pas do mocowania aplikatora do ciała pacjenta (3,2x100cm)
- ramię / statyw na aplikator manualny
- wózek na aparat
- fotel do terapii obszaru lędźwiowego kręgosłupa
- fotel do terapii okolic miednicy
- fotel do terapii obszaru lędźwiowego kręgosłupa oraz obszaru miednicy
- podest pod fotel

Patrz zakładka Konfiguracja.

Konfiguracja

Aplikator ręczny FMS2 M (15113052)



Aplikator ręczny FMS2 L (15113062)



Aplikator podłużny FMS4 M (15113057)



Aplikator pod stopy FMS (1600640)



Wózek pod aparat FMS (1600879)



Statyw pod aplikator do do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej (1600631)



Fotel do uroginekologii (1600632)



Fotel do uroginekologii i okolicy lędźwiowej (16006352)



Podest do fotela dla pacjenta (1600640)

