



Aparat do drenażu limfatycznego POWER Q1000 PLUS z 2 mankietami na nogi


Opis produktu

Aparat do masażu pneumatycznego **POWER Q1000 PLUS** to proste kompaktowe urządzenie polecane do użytku domowego.

Urządzenie współpracuje z **4-komorowymi mankietami**. Aparat poprzez dołączone do zestawu przewody wtłacza powietrze do mankietów i wypełnia kolejne komory, powodując ucisk określonych partii ciała. W zależności od potrzeb **można podłączyć 1 lub 2 mankiety**.

Obsługa aparatu do drenażu limfatycznego Power Q1000 Plus jest bardzo prosta. Za pomocą pokręteł umieszczonych na panelu przednim urządzenia **reguluje się ciśnienie oraz czas masażu pneumatycznego**.

Aparat do masażu uciskowego Power Q1000 Plus to nowoczesny wygląd i wysoka jakość wykonania. **Certyfikat medyczny CE** zapewnia bezpieczeństwo i spełnienie wszelkich norm europejskich.

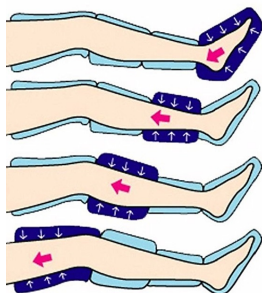

Dane techniczne aparatu do masażu pneumatycznego Power Q1000 Plus:

Zakres ciśnienia	0-235 mm Hg
Czas pracy	5-30 min.
Wymiary	260x200x125 mm
Waga	2,9 kg

Wyposażenie:

- aparat
- mankiet 4-komorowy na nogi - 2 szt.
- przewód podwójny - 1 szt.
- przewód pojedynczy - 1 szt.

Zestaw **Power Q 1000 Plus** z 2 mankietami na nogi pobudza krążenie oraz przepływ limfy w kończynach dolnych, a co za tym idzie:

- likwiduje obrzęki różnego pochodzenia
- walczy z zespołem ciężkich nóg
- idealny w profilaktyce przeciwżylakowej
- wspomaga odchudzanie i walkę z cellulitem
- likwiduje ból wynikający z tzw. "zakwasów"


Presoterapia może być wykonywana codziennie. Pojedyncza sesja powinna trwać ok 20 minut. Już po pierwszym zabiegu odczuwalne jest uczucie lekkości.

Przeczytaj:



[5 powodów, dla których warto w swoim gabinecie posiadać aparat do masażu pneumatycznego](#)

[Aparat do masażu uciskowego to niewielkie kompaktowe urządzenie znajdujące zastosowanie w medycynie, odnowie biologicznej i kosmetyce. Szeroki wachlarz zastosowań, przystępna cena oraz prosta obsługa nie wymagająca specjalnych umiejętności sprawiają, że urządzenie to warto postawić w każdym gabinecie fizjoterapii... \[więcej >>\]\(#\)](#)

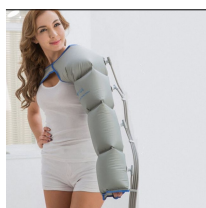

[Aparaty do masażu uciskowego - najczęściej zadawane pytania](#)

[Mimo że obsługa aparatów do drenażu limfatycznego nie wymaga specjalistycznego szkolenia, są to urządzenia medyczne, którymi przy nieodpowiednim użytkowaniu można wyrządzić krzywdę pacjentowi. Często więc pojawiają się różne wątpliwości i pytania odnośnie stosowania aparatów do masażu uciskowego. W tym artykule staramy się Państwu wyjaśnić najważniejsze z nich... \[więcej >>\]\(#\)](#)