


Bieżnia wodna FOCUS

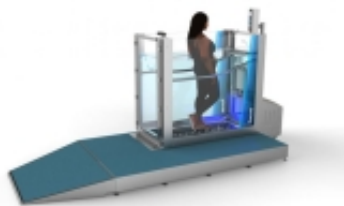

Opis produktu

Bieżnia wodna to nowoczesna forma rehabilitacji oraz fitness wykorzystująca opór wody podczas ćwiczeń. Wyporność wody odciąża stawy podczas ruchu, dzięki czemu ćwiczenia są mniej wyczerpujące niż przy tradycyjnej ich formie.

Bieżnia wodna FOCUS posiada system **opcjonalnych dodatków takich jak dysze rezystancyjne i automatyczne zarządzanie systemem wodnym**. Prostota obsługi sprawia, iż model ten wykorzystywany jest przez pacjentów w każdym wieku.

System bieżni FOCUS obejmuje komorę bieżni z platformą i rampą, wyposażenie dodatkowe oraz zbiorniki przechowywania wody znajdujące się w oddzielnym pomieszczeniu. Minimalne wymiary pomieszczenia bieżni to 5 x 4 m, oraz pomieszczenia dodatkowego: 2,5 x 4 m.

Właściwości:

- Drzwi otwierane zewnętrznie z opatentowanym systemem zatraskowym
- Zgodność z ISO 13485
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej
- Szkło strukturalne - zasięg monitorowania 360°
- System filtracji cartridge
- Wskaźniki długości kroku i głębokości wody
- System monitorowania bieżni
- Platforma operatora dla łatwego dostępu
- Dozownik chemiczny
- Dwie prędkości dyszy rezystancyjnych
- Składane siedzisko
- Dostosowywalna platforma
- Podwodne podświetlenie LED w kolorze niebieskim
- Rampa dostosowana do wózków inwalidzkich
- Moduł ekranu dotykowego (zawiera ulepszone monitorowanie systemu bieżni, zaprogramowane i programowalne funkcje)

Opcje:

- Dodatkowe, zdejmowane poręcze
- Wzmocnione siedzisko (200kg)
- Pochylenie bieżni 8%
- Spersonalizowana platforma
- Opcja zamontowania bieżni przy basenie
- Filtr piaskowy

Wymagania użytkowe:

- Minimalna wysokość sufitu: 2,5 m
- Minimalna wysokość drzwi: 2 m
- Minimalna szerokość drzwi: 1 m
- Minimalna wymagana przestrzeń: 30 m²
- Minimalne obciążenie podłogi: 1650 kg / m²

Specyfikacja techniczna:



Eres Medical Sp. z o.o.
Płuszwice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

- Maksymalne obciążenie 125 kg
- Maksymalna głębokość wody 1200 mm
- Zakres prędkości 0,2 - 11 km/h
- Czas wypełnienia/opróżnienia ok. 2,5 min
- Zakres temperatury - od temp. otoczenia do 40°C
- Wymiary (bez wyświetlacza) 1640mm x 880mm x 1650mm
- Całkowita masa pustej bieżni - 1050 kg, pełnej - 2850 kg
- Pojemność 1800 l
- Moc 400V 3 fazy, 50/60hz 40A na fazę