



Lampa operacyjna U29

Opis produktu

Lampa operacyjna [U29](#) - STEROWANIE

Kontrola za pomocą klawiszy membranowych poniższych funkcji:

- temperatura barwowa 4500°K / 5000°K
- intensywność światła do 160 klx
- średnica plamy świetlnej
- włącz i wyłącz
- funkcja światła Endo



Lampa operacyjna U29 - KOPUŁA LAMPY

Bardzo kompaktowa czasza lampy operacyjnej U29 posiada dużą powierzchnię, która emituje stabilne i zbalansowane światło. Gładka konstrukcja kopuły lampy operacyjnej U29 bez otworów oraz szczelin na powierzchni pozwala utrzymać ją w nienaganniej czystości. Polikarbonowa osłona pełni funkcję kolimatora i znacznie zwiększa efekt bezcieniowości.




Lampa operacyjna U29 - ŚWIATŁO POŚREDNIE

Światło pośrednie - istotna funkcja lampy operacyjnej U29, zapewnia operatorowi zimne i głębokie oświetlenie pola operacyjnego bez wszelkiego rodzaju odbłyśków. Zostało to uzyskane dzięki specjalnie zaprojektowanym zwierciadłach parabolicznych które odbijają całe spektrum emitowanego światła przez pojedynczą diodę z punktową dokładnością, bez rozszczepienia.

To oznacza:

- mniejsza ilość diod
- mniejsza ilość ciepła w polu operacyjnym

Dzięki zasadom optyki światła pośredniego, operator nigdy nie będzie oślepiony i zdekcentrowany przez problem z oświetleniem. Światło jest stale zogniskowane na długości 80-150cm. Średnica plamy świetlnej jest regulowana elektronicznie według rodzaju światła wymaganego do wykonywanego zabiegu.

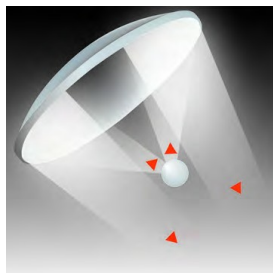

Parametry techniczne:

Dane oświetlenia

Natężenie oświetlenia	160Klx
Temperatura barwowa	4.500 / 5.000
Współczynnik odwzorowania kolorów Ra (CRI)	96
Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9	>90
Średnica pola oświetlanego d50	110 mm
Średnica pola oświetlanego d10	200 mm
Regulacja średnicy pola operacyjnego	140-230 mm
Wgłębność oświetlenia (dla 60%)	49 cm
Wgłębność oświetlenia (dla 20%)	135 cm
Średnica czaszy	52 cm
Ilość diod LED	29
Żywotność źródła światła	>60.000 h

Dane elektryczne

Natężenie	100-240V
Zasilanie	50/60Hz
Pobór mocy	48 W

Lampa operacyjna U29 - zobacz film:

Dostępne konfiguracje

[Lampa operacyjna U29 sufitowa](#)



Lampa operacyjna U29 sufitowa z podwójnym przegubem



Lampa operacyjna U29 sufitowa dwuczaszowa



Lampa operacyjna U29 sufitowa dwuczaszowa z podwójnym przegubem



Lampa operacyjna U29 jezdna



Linki

Więcej o lampach Rimsa - lampyoperacyjne.eu