


Przenośny aparat do dwukanałowej magnetoterapii MAGNETOTRONIC MF-2

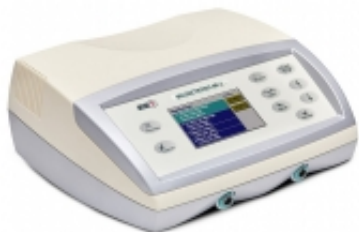

Opis produktu

Aparat **Magnetronic MF-2** jest ulepszoną wersją aparatu MF-8. Został rozbudowany o **dodatkowy kanał zabiegowy** oraz zyskał nowy, **kolorowy (4,3") ekran graficzny z panelem dotykowym**. Opracowano dla niego oryginalne aplikatory znajdujące zastosowanie w terapii okolic głowy i małych powierzchni ciała, jednocześnie zachowując kształty modulacji i parametry analogiczne jak w większych aparatach. Jego niewątpliwą zaletą jest niska cena - w porównaniu do aparatów z dużymi aplikatorami szpulowymi jest kilka razy tańszy.

Charakterystyka aparatu

- może być wykorzystany jako aparat przenośny
- dwa kanały zabiegowe
- kolorowy (4,3") ekran graficzny z panelem dotykowym
- zestaw lekkich aplikatorów do wyboru
- specjalizowane aplikatory do terapii okolic głowy, małych powierzchni ciała i kończyn
- płynna regulacja aplikatora AST-2 względem okolic głowy
- możliwość wykorzystania cewek aplikatora AST-2 po odłączeniu od statywu
- bardzo korzystna cena w stosunku do większych aparatów

Zastosowanie aplikatora AST-2 umożliwia płynną regulację jego ustawienia względem okolicy głowy - poszerza zakres działania w schorzeniach takich jak: chroniczne zapalenie zatok obocznych nosa, zapalenie zatoki szczękowej prawej i lewej oraz zatoki czołowej, chroniczne zapalenie migdałów, bóle migrenowe, nerwobóle nerwu trójdzielnego.

Aplikator AST-2 umożliwia penetrację zmiennym polem magnetycznym małych powierzchni ciała np. śródstawowo obejmując stawy międzypaliczkowe, śródreżca, nadgarstkowe, łokciowe, skokowe górne i dolne (choroby zwyrodnieniowe stawów).

Aplikator APE-1 dzięki jego elastycznej konstrukcji wywołuje pozytywne działanie miejscowe w stłuczeniach, zwichnięciach, skręceniach - obrażeniach miękkich struktur okołostawowych. Dodatkowo wyniki leczenia uzyskuje się w schorzeniach o charakterze zwyrodnieniowym, bólach przewlekłych, zmianach stawowych kręgosłupa, krzyżowo-biodrowych, kolanowych, w stawie ramiennym. Aplikator APE-1 pozwala również na stosowanie w tzw. punktach bólowych.

Aplikator szpulowy AS-204 pozwala na wygodne wykonywanie zabiegów na kończynach, będąc jednocześnie znacznie lżejszym niż jego podobne odpowiedniki. Rozmiar wewnętrzny 200mm - do zabiegów kończyn. Jeżeli aparat jest wykorzystywany stacjonarnie, dla wygody sugerujemy używanie razem z mobilnym stolikiem S-200N.

Dane techniczne

Kształty zmian pola magnetycznego: sinusoida, prostokąt, trójkąt - unipolarne, bipolarne.

MX1 - kolejna zmiana kształtów modulacji, przy stałej częstotliwości.

MX2 - kolejna zmiana kształtów modulacji, z jednoczesną zmianą częstotliwości.

Częstotliwość zmian pola magnetycznego 2 - 50 Hz

Zmiana indukcyjności pola magnetycznego 0 - 8 mT

Czas impuls/przerwa 0.5 - 8 s



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

Zasilanie
Masa aparatu

230 V / 50 Hz / 50 VA
3 kg

Wyposażenie opcjonalne:

Aplikator statywowy AST-2, płaski aplikator elastyczny APE-1, aplikatory płaskie AP-1, AP-2, aplikator szpulowy AS-204.