


Spirometr Spirodoc

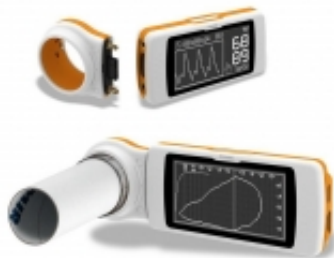

Opis produktu

Spirodoc to nowoczesny spirometr z dotykowym wyświetlaczem z możliwością połączenia z komputerem za pomocą USB lub Bluetooth.

Dwa tryby pracy:

Spirometr Spirodoc posiada **dwa tryby pracy**, zróżnicowane ze względu na użytkownika:


- **zaawansowany** przeznaczony dla lekarza
- **podstawowy** przeznaczony do obsługi urządzenia przez pacjenta w warunkach opieki domowej.

Mobilność:

Niewielkie wymiary, dotykowy ekran LCD, długo trzymająca bateria oraz duża baza pamięci i etui w zestawie sprawiają, że spirometr Spirodoc zabierzesz wszędzie ze sobą, nie ogranicza Cię Twój gabinet.

Oprogramowanie spirometryczne WinspiroPro na Twój komputer:

- Bazujące na systemie Windows rozwiązanie dla spirometrii, pulsoksymetrii i telemedycyny.
- Szeroki wybór należnych ustawień i wartości zawierający należne ustawienia GLI, LNN i ZScore.
- Łączność EHR / EMR.
- NET VERSION - współużytkuj jedną bazę danych pomiędzy różnymi stacjami roboczymi.

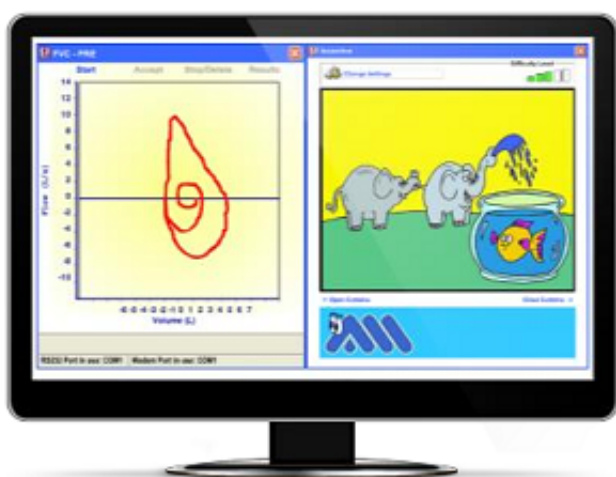



System motywacyjny dla dzieci

Spirometr Spirodod idealnie nadaje się do badania małych pacjentów. Posiada wbudowany **system motywacyjny dla dzieci**. Poprzez różnego rodzaju kolorowe animacje, które wchodzi w interakcję z małymi pacjentami, badanie staje się przyjemniejsze i łatwiejsze do przeprowadzenia.

Mierzone parametry spirometryczne:

FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV3, FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, EF25%-75%, FET, Wiek płuc, Extr.Vol., FIVC, FIV1, FIV1/FIVC%, PIF, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/ti, MVV.

Dane techniczne:

Połączenie	USB, Bluetooth
System pomiaru przepływu/pojemności	dwukierunkowa turbina cyfrowa – jednorazowego lub wielokrotnego użytku
Czujnik temperatury	półprzewodnik (0-45°C)
Zasilanie	akumulator
Ustniki	średnica zewnętrzna 30 mm
Wymiary / waga	101 x 48 x 16 mm / 99g
Zakres pojemności	10 l
Zakres przepływu	16 l/s
Dokładność pomiaru pojemności	+/- 3% lub 50 ml
Dokładność pomiaru przepływu	+/- 5% lub 200 ml/s
Opór dynamiczny przy 12 l/s	
Próba broncholidacyjna (PRE-POST)	tak
Oprogramowanie spirometryczne	WinSpiro PRO

Wyposażenie standardowe:

- klips na nos do spirometrii
- etui na spirometr
- CD z oprogramowaniem spirometrycznym
- kabel USB

UWAGA! Cena nie obejmuje turbin do spirometru i ustników, które są dostępne jako oddzielne produkty.

Dostępne turbiny do spirometru Spirodod:

<p>FlowMIR Turbiny jednorazowe</p>	<p>W zestawie ustnik Nie wymagana dezynfekcja, ani kalibracja turbiny Każda turbina zapakowana indywidualnie w plastikową torebkę Opakowanie zbiorcze zawiera 60 turbin</p>
---	--



Turbina wielokrotnego użytku



Konieczność dokupienia jednorazowych [ustników do spirometrii](#)
Wymagana dezynfekcja oraz kalibracja turbiny
Pakowane pojedynczo w kartonik