

Terapia falami radiowymi RF Ablator



Opis produktu

RF ABLATOR - ODMŁADZAJĄCA TERAPIA

Pod wpływem działania fal radiowych, które sięgają do ok. 2 cm włąb skóry, włókna kolagenowe są podgrzewane do temperatury ok. 54°C. Wytworzone w ten sposób ciepło endogenne powoduje napinanie się włókien kolagenowych, co niesie za sobą **ujędrnienie skóry i zmniejszenie zmarszczek**. Ponadto fale radiowe stymulują fibroblasty do regeneracji i wytwarzania nowych włókien kolagenu oraz elastyny. Zwiększa się również gęstość i elastyczność skóry.


Terapia falami RF osiąga więc dobre efekty w **poprawie owalu twarzy, redukcji zwisającego podbródka, uniesieniu opadających powiek oraz niwelowaniu obrzęków pod oczami, a także w spłyceniu blizn**. W wyniku działania fal radiowych przyspieszony zostaje również drenaż limfatyczny, dzięki czemu następuje szybsze wydalenie toksyn, redukcja wolnych rodników. Skóra staje się bardziej dotleniona, odżywiona, poprawia się jej kolor.

Efekty działania fal radiowych widoczne są natychmiast. Jednak w celu długotrwałego zachowania ujędrnionej i poprawionej skóry twarzy, należy poddać pacjenta serii ok. 5 zabiegów w odstępie 3 tygodni. Efekty utrzymują się nawet do 5 lat.

RF ABLATOR - WALKA Z OTYŁOŚCIĄ

Fale radiowe, docierając włąb skóry, sięgają również komórek tłuszczowych, tzw. adipocytów. Wytwarzane ciepło endogenne powoduje rozpuszczenie i rozbicie ich, czyli lipolizę. Wydzielają się kwasy tłuszczowe, które pod wpływem stymulowanego ciepłem metabolizmu zostają w postaci płynnej wydzielane najpierw do przestrzeni międzykomórkowej, po czym za pomocą układu krwionośnego i limfatycznego trafiają do wątroby i nerki, gdzie są trawione i wydzielane.

Zabieg ten jest polecany do **redukcji cellulitu, redukcji nadmiaru tkanki tłuszczowej, ujędrnianiu skóry brzucha, ud, pośladków**.

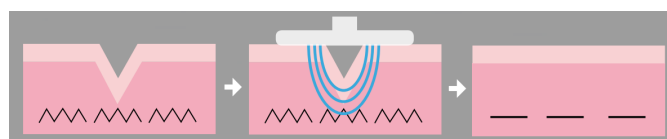

Działanie fali RF

RF ABLATOR - ZASTOSOWANIE

- Lifting czoła i brwi
- Lifting górnych powiek
- Niwelowanie obrzęków pod oczami spowodowanych wiotkością skóry
- Utrata jędrności policzków
- Fałdy nosowo - wargowe
- Utrata jędrności linii żuchwy, podbródka i szyi
- Lifting pośladków i ud
- Ujędrnienie skóry na brzuchu
- Likwidacja cellulitu
- Redukcja nadmiernej tkanki tłuszczowej



Lifting twarzy

Walka z nadwagą

RF ABLATOR - ZABIEG

Fale radiowe to bezpieczny, nieinwazyjny zabieg, przez niektórych określany nawet jako przyjemny. Pojedynczy zabieg daje tzw. efekt bankietowy, by osiągnąć długotrwały efekt wskazana jest seria 4-8 zabiegów w odstępach ok 15-25 dni jeśli chodzi o zabiegi na twarz i co ok. 10 dni jeśli chodzi o zabiegi na ciało.

Czas zabiegów:

- twarz → 20 min
- twarz, szyja, dekolty → 30 min
- okolica oka → 10 min
- ciało → w zależności od powierzchni - od 20 do 60 min

Aby ułatwić penetrację fal radiowych stosuje się hydrożele, które chronią także skórę przed poparzeniem ze względu na działanie chłodzące naskórek.

O czym należy pamiętać?


- Należy zmniejszyć parametry ustawień w miejscach gdzie kości są położone płytko pod skórą.
- Przed zabiegiem należy odtłuścić powierzchnię skóry
- Kontakt głowicy ze skórą powinien być równomierny na całej powierzchni
- W trakcie zabiegu nie należy odrywać elektrod od skóry
- Na skórę stosuje się obfitą ilość żelu sprzegającego skórę z głowicą urządzenia

RF ABLATOR - EFEKTY TERAPII

[Zobacz zdjęcia >>](#)

RF ABLATOR - CECHY URZĄDZENIA:

- 7 calowy ekran dotykowy o wysokiej jasności
- Intuicyjny interfejs, duże czytelne ikony
- Sterowanie jednostką za pomocą jednego pokrętła
- Wachlarz gotowych ustawień pracy
- Własne programy na urządzeniu lub dostępne przez port USB
- Dwa tryby pracy - pojemnościowy i oporowy w zależności od potrzeb
- Możliwość pracy ciągłej i impulsowej o regulowanym czasie pracy i przerwy, gdy niepożądany jest efekt termiczny
- Możliwość kontroli parametrów w trakcie trwania terapii
- Bieżący podgląd aktualnej energii przepływającej przez tkanki pacjenta podany w cyfrach
- Możliwość aktualizacji przez USB
- 3 pozycje głowicy dla lepszej efektywności terapii

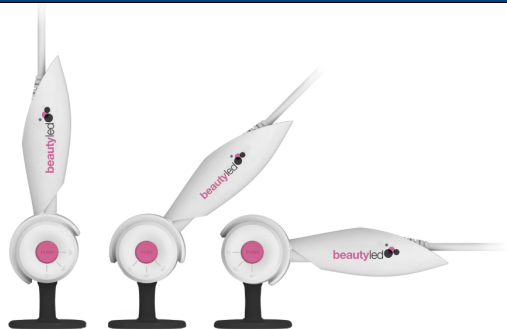

Parametry techniczne:

Obsługa

Maksymalna moc
Częstotliwość pracy
Tryby

Tryby pracy
Zasilanie
Pobór prądu
Waga
Wymiary

Kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD 7" + obsługa opcjonalna
za pomocą klawiatury i potencjometru
150W/250VA (maksymalna bezpieczna dla zdrowia ludzkiego)
450, 550 kHz
Oporowy (Resistive)

Pojemnościowy (Capactive)
Ciągły i impulsowy regulowany (atermiczny)
90-240 Vac, 50-60 Hz
300 VA
5kg
170x315x390mm

Wyposażenie standardowe:

- urządzenie RF Ablator
- aplikator
- 3 elektrody oporowe (srebrne) Ø 24, 48, 62 mm
- 3 elektrody pojemnościowe (czarne) Ø 24, 48, 62 mm
- elektroda neutralna z przewodem

Zobacz, jak to działa:
