




## Terapia przeciwzakrzepowa DVT-2600

### Opis produktu

Terapia urządzeniem DVT-2600 polega na sekwencyjnym ucisku kończyn poprzez wpompowywanie powietrza do poszczególnych komór mankietów.

Terapia poprawia przepływ krwi i metabolizm, zapobiegając tym samym powstawaniu skrzepów i zatorów w żyłach głębokich.

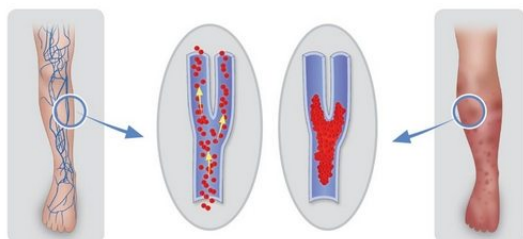

Prawidłowy przepływ krwi

Zakrzepica żył głębokich

**Profilaktyka zakrzepicy żył głębokich** to głównie podawanie pacjentowi heparyny, doustnych leków przeciwkrzepliwych lub stosowanie pończoch uciskowych. Sposoby te są jednak nie zawsze skuteczne, nie u każdego pacjenta można je stosować i nie pozostają obojętne dla organizmu. Terapia DVT-2600 w sposób mechaniczny nieinwazyjny, bez skutków ubocznych zapobiega tworzeniu się skrzepów.

Aparat można stosować zamiennie lub uzupełniająco w profilaktyce zakrzepicy.

**System DVT-2600** składa się ze sterownika, zestawów przewodów i mankietów.

Bezpieczeństwo zapewnia układ wewnętrznej kontroli aparatu, który diagnozuje sterownik, przewody powietrzne, ich podłączenie, szczelność mankietów, stan akumulatora oraz układ porównujący wartość nastawionego ciśnienia z ciśnieniem w mankiecie.

### Charakterystyka systemu DVT-2600:

- Uruchomienie pracy systemu poprzez przycisk Start / Stop
- Automatyczne rozpoznanie mankieta
- Zapisane ustawienia ciśnienia
- System wykorzystywania zapasowej energii z akumulatora podczas braku zasilania zewnętrznego
- Alarmy Systemu Bezpieczeństwa: nieszczelność mankieta, niesprawność systemu zasilania, nieszczelność połączenia mankieta – aparat
- Możliwość wyboru trybu sterowania manualnego: regulowane ciśnienie, czas przerwy, czas zabiegu
- Ekran LCD

### Funkcje systemu:

- Automatyczne rozpoznanie mankietu
- Zapisane ustawienia ciśnienia
- System wykorzystywania zapasowej energii z akumulatora podczas braku zasilania zewnętrznego
- Alarmy Systemu Bezpieczeństwa: nieuszczelność mankietu, niesprawność systemu zasilania, nieuszczelność połączenia mankieta – aparat
- Możliwość wyboru trybu sterowania manualnego: regulowane ciśnienie, czas przerwy, czas zabiegu
- Automatyczny gradient ciśnienia
- Możliwość jednoczesnej pracy dwóch mankietów
- Tryb limfatyczny – łagodniejsza kompresja

### Specyfikacja techniczna:

- Napięcie zasilające 230 V, 50/60 Hz
- Pobór mocy: 90-110 VA
- Ustawiane ciśnienia:
  - Kończyna dolna: 20 - 60 mmHg  $\pm$  15 mmHg (skok regulacji: 10 mmHg)
  - Stopa: 120 - 140 mmHg  $\pm$  15 mmHg (skok regulacji: 10mmHg)
- Regulacja czasu przerwy: 24, 48, 60 sekund
- Główne wymiary (mm): 200 (szer.) x 170 (gł.) x 190 (wys.)  $\pm$  10 mm
- Waga: 3,5 kg (łącznie z baterią)
- Czas zużycia baterii: 6-8 godzin

### Mankiety:

- Specjalne wykończenie z powłoką zapobiegającą zanieczyszczeniom
- Delikatne dla skóry
- Bezpieczne podłączenia mankietów mające na celu zapobieganie wszelkim otarciom skóry



Mankiet na udo i podudzie – 3 komory powietrzne



Mankiet na łydki – 3 komory powietrzne



Mankiet typu „but” – 3 komory powietrzne



Mankiet na stopę – 1 komora powietrzna



Mankiet na łydkę i stopę  
(jednoczesne zastosowanie 2 różnych mankietów)