


Wanna do hydromasażu LAGUNA PLUS



Serwis

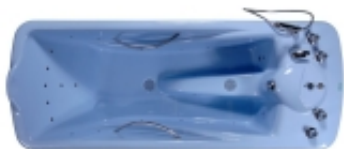

Szkolenie



Transport



Opis produktu

Wanna do hydroterapii Laguna Plus to elegancja i funkcjonalność w Twoim ośrodku na długie lata.

Niecka wanny wyprofilowana tak, by zapewnić **wygode i komfort użytkownika, a jednocześnie oszczędność zużycia wody**. Dodatkowo w wannie zamontowane zostały **uchwyty** dla użytkownika.

Wykonanie wanien do hydroterapii marki Chirana z materiału kompozytowego III generacji wzmocnianego włóknem szklanym zapewnia jej **długotrwałość** bez względu na rodzaj kąpiei i **odporność** na substancje chemiczne.

Wanna do hydroterapii Laguna Plus wyposażona jest w **25 dysz do masażu wirowego z funkcją napowietrzania strumienia wody**.

Sterowanie manualne.

Luksusowy design

Wanny marki Chirana Progress cechuje elegancki i nowoczesny wygląd. Idealnie wpisują się w każde wnętrza, nadając im luksusowego charakteru. Możliwość wyboru koloru wanny z dużej palety barw pozwala na idealne dopasowanie urządzenia do estetyki otoczenia lub swoich upodobań, oraz na nadanie tym pomieszczeniom odpowiedniego charakteru.

Wytrzymały materiał

Skorupy wanien do hydroterapii wykonane są z materiału kompozytowego III generacji wzmocnianego włóknem szklanym, pokryte warstwą żelową. Jest to bardzo wytrzymały i odporny na działanie różnych czynników materiał. Dzięki temu w wannach możliwe jest wykonywanie zabiegów balneoterapii z zastosowaniem wód kwasowęglowych, termalnych, solanek i innych.

Komfort pacjenta

Anatomicznie wyprofilowane wnętrza wanien medycznych marki Chirana Progress zapewniają komfort dla pacjenta. Tam, gdzie jest to potrzebne, wytłoczone zostały zagłówki, oparcia pleców, podparcia stóp, a również przymocowane odpowiednio profilowane poręcze i uchwyty. Do wyższych wanien dodawane są schodki z antypoślizgową powierzchnią, by ułatwić pacjentowi wejście i wyjście z wanny.

Łatwe sterowanie wanną

Obsługa wanny jest intuicyjna i bezproblemowa. Wszystkie przyciski i zawory umiejscowione są tak, by maksymalnie ułatwić osobom prowadzącym zabieg pracę.

Wyjątkowo trwałe dysze

Dysze w wannach medycznych Chirana Progress o unikalnej, opatentowanej, prawnie chronionej konstrukcji są praktycznie niezniszczalne. Wykonane ze stali nierdzewnej, bez użycia kleju, ułatwiają konserwację wanny oraz utrzymanie jej w nienagannej czystości. Dysze do hydromasażu posiadają regulację wydajności oraz wyposażone są w funkcję napowietrzania strumienia wody.

Łatwa konserwacja

- prysznic do czyszczenia wanny z zaworem odcinającym
- system całkowitego odwadniania układu do hydromasażu
- funkcja przepłukiwania dysz do hydromasażu
- w opcji elektromagnetyczny zmiękcacz wody (zapobiega osadzaniu się kamienia)

Oszczędność kosztów

- Możliwość przyłączenia do systemu recyklingu (możliwość napełniania i wypuszczania wody z wanny do systemu recyklingu)
- Niecki wanien wyprofilowane są tak, by ograniczyć niepotrzebne zużycie wody przy napełnianiu

Wysokie bezpieczeństwo

Wszystkie urządzenia do hydroterapii firmy Chirana Progress są wyrobami medycznymi (zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych, która implementuje dyrektywę 93/42/EWG) przeznaczonymi do profesjonalnego użytkowania w zakładach opieki zdrowotnej, w związku z czym podlegają bardziej restrykcyjnym przepisom bezpieczeństwa niż inne wanny tego typu.

Wanny medyczne wykonane są z bezpiecznych nieszkodliwych dla zdrowia materiałów z odpowiednim certyfikatem. Powierzchnia wanny pokryta została powłoką ionpure, która w środowisku wilgotnym ma właściwości antybakteryjne.

Dla bezpieczeństwa pacjenta wanny można wyposażyć w poręcze i schodki z antypoślizgową powierzchnią wspomagającą wchodzenie i wychodzenie z wanny. Dodatkowo wszystkie wanny firmy Chirana Progress posiadają zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho.

Bezproblemowe serwisowanie

Sieć punktów serwisowych w całym kraju.

Szereg opcji dodatkowych:

- chromatoterapia (punkty świetlne RGB LED)
- wąż do hydromasażu

Wanna medyczna Laguna Plus - dane techniczne:

Dysze do masażu wirowego	25
Pojemność użytkowa	200 l
Maksymalna pojemność	300l
Waga	114 kg
Wymiary zewn. (dł. x szer. x wys.) w mm	2200 x 870 x 790-815
Zasilanie	3 x 400 V 230V
Moc	2200 VA 1500 / 2100 VA
Czas napełniania (do poj. użytkowej)	2,5 min
Czas wypuszczania wody	2,2 min
Wyposażenie standardowe:	

- system przepłukiwania dysz
 - przyłącze wody dodatkowej
 - prysznic ręczny do higienicznego czyszczenia wanny
-

Wyposażenie dodatkowe:

- chromatoterapia
- podłączenie do systemu recydingu
- podparcie nóg
- schodki niskie 1-stopniowe
- elektromagnetyczny zmiękcacz wody

Kolory standardowe:

niebieski



zielony



Za dopłatą wybór koloru wanny z szerokiej palety barw.

Przeczytaj:

[Jak wybrać wannę do hydroterapii?](#)

[Jeśli dysponujemy odpowiednią przestrzenią w swoim ośrodku rehabilitacji i wystarczającymi nakładami finansowymi, warto pomyśleć o wyposażeniu go w wanny do hydroterapii. Rodzajów sprzętu do hydroterapii na rynku jest obecnie naprawdę dużo i oferują one wiele możliwości terapii: medyczne wanny do hydromasażu, wirówki kończyn górnych, wirówki kończyn dolnych, wanny motylkowe do ćwiczeń z pacjentem, katedry natryskowe... \[czytaj więcej >>\]\(#\)](#)