

Wanna do hydroterapii OCEAN FORTE



Serwis	✓
Szkolenie	✓
Transport	✓


Opis produktu

Wanna do hydroterapii **Ocean Forte** służy do wykonywania masażu podwodnego całego ciała dzięki wbudowanemu **wężowi do masażu z napowietrzaniem strumienia wody**.

Dodatkowo rozbudowana jest o **dysze do hydromasażu**:

- **40 klasycznych dysz** do hydromasażu wersji **Ocean Forte Classic**
- dysze do hydromasażu z funkcją napowietrzania strumienia wody - **80 szt. w 2 strefach** - **Ocean Forte 2.0**,
- dysze do hydromasażu z funkcją napowietrzania strumienia wody - **60 szt. w 3 strefach** - **Ocean Forte 3.0**,
- dysze do hydromasażu z funkcją napowietrzania strumienia wody - **100 dysz w 4 strefach** - **Ocean Forte 4.0**

Wersja Classic:

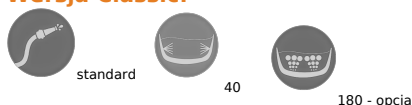

Wersja 2.0:



Wersja 3.0:



Wersja 4.0:



Sterowanie elektroniczne za pomocą wyświetlacza dotykowego wspomaga obsługę wanny.

28 wbudowanych programów do masażu.

W standardzie **dwustopniowe schodki** dla pacjenta ułatwiające wchodzenie i wychodzenie z wanny oraz **poręcze** wewnątrz wanny.

Dla większego komfortu pacjenta wewnątrz wanny zostało **wytłoczone anatomicznie** z podparciem pleców.

Luksusowy design

Wanny medyczne marki Chirana Progress cechuje elegancki i nowoczesny wygląd. Idealnie wpisują się w każde wnętrza, nadając im luksusowego charakteru. Możliwość wyboru koloru wanny z dużej palety barw pozwala na idealne dopasowanie urządzenia do estetyki otoczenia lub swoich upodobań, oraz na nadanie tym pomieszczeniom odpowiedniego charakteru.

Wytrzymały materiał

Skorupy wanien medycznych wykonane są z materiału kompozytowego III generacji wzmocnianego włóknem szklanym, pokryte warstwą żelową. Jest to bardzo wytrzymały i odporny na działanie różnych czynników materiał. Dzięki temu w wannach możliwe jest wykonywanie zabiegów balneoterapii z zastosowaniem wód kwasowęglowych, termalnych, solanek i innych.

Komfort pacjenta

Anatomicznie wyprofilowane wnętrza wanien medycznych marki Chirana Progress zapewniają komfort dla pacjenta. Tam, gdzie jest to potrzebne, wytłoczone zostały zagłówki, oparcia pleców, podparcia stóp, a również przymocowane odpowiednio profilowane poręcze i uchwyty. Do wyższych wanien dodawane są schodki z antypoślizgową powierzchnią, by ułatwić pacjentowi wejście i wyjście z wanny.

Łatwe sterowanie wanną

Obsługa wanny jest intuicyjna i bezproblemowa. Wszystkie przyciski i zawory umiejscowione są tak, by maksymalnie ułatwić osobom prowadzącym zabieg pracę. Sterowanie wanną ułatwia wbudowany wyświetlacz dotykowy.

Wyjątkowo trwałe dysze

Dysze w wannach Chirana Progress o unikalnej, opatentowanej, prawnie chronionej konstrukcji są praktycznie niezniszczalne. Wykonane ze stali nierdzewnej, bez użycia kleju, ułatwiają konserwację wanny oraz utrzymanie jej w nienaganej czystości. Dysze do hydromasażu posiadają regulację wydajności oraz wyposażone są w funkcję napowietrzania strumienia wody.

Łatwa konserwacja

- prysznic do czyszczenia wanny z zaworem odcinającym
- system całkowitego odwadniania układu do hydromasażu
- funkcja przepłukiwania dysz do hydromasażu
- w opcji elektromagnetyczny zmiękcacz wody (zapobiega osadzeniu się kamienia)

Oszczędność kosztów

- Możliwość przyłączenia do systemu recyklingu (możliwość napełniania i wypuszczania wody z wanny do systemu recyklingu)
- Niecki wanien wyprofilowane są tak, by ograniczyć niepotrzebne zużycie wody przy napełnianiu

Wysokie bezpieczeństwo

Wszystkie urządzenia do hydroterapii firmy Chirana Progress są wyrobami medycznymi (zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych, która implementuje dyrektywę 93/42/EWG) przeznaczonymi do profesjonalnego użytkowania w zakładach opieki zdrowotnej, w związku z czym podlegają bardziej restrykcyjnym przepisom bezpieczeństwa niż inne wanny tego typu.

Wanny wykonane są z bezpiecznych nieszkodliwych dla zdrowia materiałów z odpowiednim certyfikatem. Powierzchnia wanny pokryta została powłoką ionpure, która w środowisku wilgotnym ma właściwości antybakteryjne.

Dla bezpieczeństwa pacjenta wanny można wyposażyć w poręcze i schodki z antypoślizgową powierzchnią wspomagające wchodzenie i wychodzenie z wanny. Dodatkowo wszystkie wanny firmy Chirana Progress posiadają zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho.

Bezproblemowe serwisowanie

Sieć punktów serwisowych w całym kraju.

Szereg opcji dodatkowych:

- chromatoterapia (punkty świetlne RGB LED)
- masaż perełkowy
- ozonoterapia

Wanna do hydroterapii Ocean Forte - dane techniczne:

Pojemność użytkowa	280 l
Maksymalna pojemność	450 l
Waga	137 kg
Wymiary zewn. (dł. x szer. x wys.) w mm	2500 x 960 x 920-945
Zasilanie	3×400 V / 50 Hz
Moc	3500 VA
Czas napełniania (do poj. użytkowej)	3,5 min.
Czas wypuszczania wody	3,1 min.
Wyposażenie dodatkowe:	

- 180 dysz do masażu perełkowego z systemem osuszania
- oparcie na nogi
- podłączenie do systemu recyklingu
- poręcz do schodków
- elektromagnetyczny zmiękczac wody
- chromatoterapia
- ozonoterapia
wąż do masażu podwodnego dla wersji 2.0, 3.0, 4.0

Kolory standardowe:

niebieski



zielony



Za dopłatą wybór koloru wanny z szerokiej palety barw.

Przeczytaj:

[Jak wybrać wannę do hydroterapii?](#)

[Jeśli dysponujemy odpowiednią przestrzenią w swoim ośrodku rehabilitacji i wystarczającymi nakładami finansowymi, warto pomyśleć o wyposażeniu go w wanny do hydroterapii. Rodzajów sprzętu do hydroterapii na rynku jest obecnie naprawdę dużo i oferują one wiele możliwości terapii: medyczne wanny do hydromasażu, wirówki kończyn górnych, wirówki kończyn dolnych, wanny motylkowe do ćwiczeń z pacjentem, katedry natryskowe... \[czytaj więcej >>\]\(#\)](#)